



回って止まって 前後にスライド! テーブルにピタッ!!

ピタットチェア



PT-FT25X NA/DK

特許取得済



おはよう日本
NHKにて紹介されました

テーブルに 軽い力でピタッと着けるので
毎日の食事も楽々! お座りになるご自身でも
簡単に操作が可能です。

レバー操作の特徴

■スライドレバー

ご自身で操作ができる場合には、
スライドレバーを引き上げるこ
とでロックが解除し
前後に 12cm スライ
ドし自動的にロッ
クします。車のシート
調整と同じ操作なので
直感的な操作が可能です。

■左右に 回転レバー

回転レバーを引
くことでロッ
クが解除され、45
度ごとに回転が
自動ロックしま
す。


■介助者用 スライド ボタン

サポートする方が座面を前後にスライ
ドする場合に、ボタンを押しロックを
解除しながら座面を押し引きできます。

4つの機能


■回転ロック機能

左右の肘掛け下にあるレバー
を引くことでロックを解除し左
右に回転させることができます。
45度ずつで自動的にロック
されるため立ち座りの際も安
心安全です。

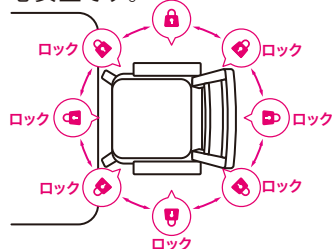

■座面スライド機能

座面前下にあるレバーを引き上
げロックを解除し座面を前後
にスライドする事で足が不自
由な方でも軽い力でテーブルに
近付くことが可能です。また、座
面の後ろのスライドボタンはレ
バーと連動しており、介助者も
操作がしやすくなっております。

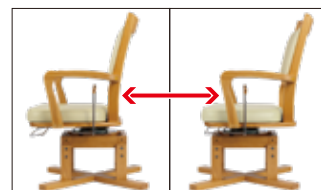

■安定のX字脚

脚部はX字脚でどの角度でも
安定性があり、回転する際も足
がひっかかりにくい構造です。
脚裏がフラットで接地面が広
い為、畳やカーペットのお部屋
でも安定し、跡が付きにくくな
っております。

■座面の高さは3段階に 調整可能

脚部の組付け位置を換えるこ
とで、座面の高さを36cm・
40cm・44cm の3段階に調節
ができます。

スマイルケア もっと笑顔に、ずっと笑顔で

ラクラク介護椅子

簡単操作

負担を軽減

持ち上げない

自立支援に

【主な仕様】

寸法：右図参照

重量：17.5kg

材質

フレーム / ラバーウッド

(アミノアルキド塗装)

クッション / ウレタン

張地 / 合成皮革



色 / ナチュラル、ダーク

耐荷重：80kg

付属品：組立用六角レンチ、
キズ防止脚裏フェルト 5 枚

保証期間：ご購入後 1 年間

【概略寸法】

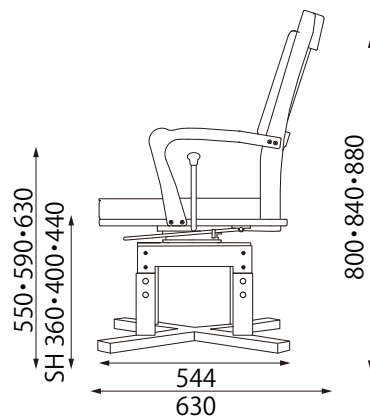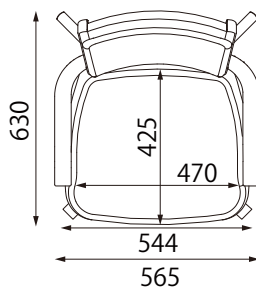

オプションのご案内



介助延長スライドレバー

3,200 円 (税別) PT-KJL

スライドボタンを延長することにより、介助者が腰を屈めることなく、背面から座面をスライドさせることができます。



ヘッドレスト

21,000 円 (税別) PT-HDR20

高さ・角度の調整ができます。



フットレスト (足置き台)

17,800 円 (税別) FR-25BR

高さ・角度が 4 段階の調整ができます。



背面クッション部分は座布団としても利用できます。

ピタットクッション E

27,000 円 (税別) PT-CS (各色)

両サイドと背面から、体幹をしっかりホールドします。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方をサポートします。

姉妹機 立ち上がり補助機能付きタイプ (介護保険レンタル対応)


回転、スライド機能はそのまま 立ち上がり補助機能付き。座面高は 380mm・420mm・460mm の 3 段階調整可能です。

ピタットチェア アシスト

TAIS コード：01916-000002

ピタットチェア アシスト

158,000 円 (税別) PT-AS24X

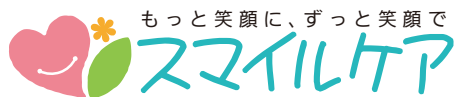

もっと笑顔に、ずっと笑顔で

株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32
TEL.089-958-2483 FAX.089-958-2109

<https://officelabo.co.jp>

お問い合わせは